

Relief Insert® 2.0 Produktfamilie

Fußlagerungssorthese | Unterschenkel-Fußsorthese | Achilles-Walker



Ein Produkt –
viele
Anwendungen





Relief Insert® 2.0

Fußlagerungsorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0025

Sichere Lagerung direkt im OP.

Die Lagerungsschiene dient der Positionierung des Unterschenkels zum Fuß im 90° Winkel.

Zur Achillessehnen-Entlastung können die DAW Fersenkeile verwendet werden, um einen vollflächigen Kontakt zum Fuß zu erhalten.



**Pumpe
+ Ventil**

**Automatische
Weitenregulierung**

Regler auch zum
Aushaken

**Austauschbare
Innensohle**



Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- Prä- und postoperative Lagerung
- Spitzfußprophylaxe
- Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- Immobilisierung nach Unfall
- Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)

Bei Verwendung mit Fersenkeilen:

- Achillessehnenrupturen
- Postoperativ bei Achillessehnennaht
- Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen
- Tendinitis im Achillessehnenbereich
- Plantarflexionskontraktur von mehr als 10°
- Verkürzung der Wadenmuskulatur



Relief Insert® Walker 2.0

Unterschenkel-Fußorthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0070

Lagerungs- schiene und Walker in einem.

Durch das Anlegen des Fußteil-entlastungsschuhs Relief Dual® Plus wird die Lagerungsschiene zu einer mobilisierenden Unterschenkel-Fußorthese. Der Relief Insert® Walker 2.0 kann zur zusätzlichen plantaren Druckentlastung mit verschiedensten DARCO Weichbettungssohlen angepasst werden.

Durch die bereits im Walker eingelegte PegContour® Insole Uni – eine Waben-Weichbettungseinlage mit Fersenkontur und Memory-Foam-Effekt – wird eine optimale Druckumverteilung erreicht. Die einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) erlauben eine individuelle Anpassung und ermöglichen eine punktuelle Druckentlastung.



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Relief Insert® 2.0 | Lagerungsschiene
- 2 PegContour® Insole Uni | Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle
- 3 Relief Dual® Plus | Fußteilentlastungsschuh

Indikationen

- TMT 1 Arthrodesen (Lapidusarthrodesen)
- Nach Metatarsalfraktur-Operationen
- Nach Hallux Valgus-Operationen
- Nach Hallux Rigidus-Operationen
- Nach Hammer- und Krallenzehen-Operationen
- Frakturen der Phalangen
- Nach Rückfußoperationen
- Bei Bandrupturen am Sprunggelenk
- Postoperativ nach Haglundexostosen-abtragungen (bei intakter Achillessehne)
- Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- oder Knöchelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen
- OSG Arthrodesen
- Postoperativ nach Weberfrakturen



Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Unterschenkel-Fußorthese mit Achillessehnenentlastung
Hilfsmittelnummer 23.06.01.1021

Entlastung der Achilles- sehne.

Der Relief Insert® Walker 2.0 Achill ist eine Unterschenkel-Fußorthese mit 3-teiligem Keil-Set zur Achillessehnenentlastung.

Die Erhöhung und der Spitzfußwinkel kann durch Variieren der angewendeten Keile auf den Patienten angepasst werden. 3 Keile entsprechen 120°. Eine schrittweise Entnahme der Keile ermöglicht den Spitzfußwinkel dem Therapieverlauf anzupassen.

Der offene und weiche Fersenbereich gewährleistet eine gute Luftzirkulation.



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Relief Insert® 2.0 | Lagerungsschiene
- 2 DAW | Fersenkeile
- 3 Relief Dual® Plus | Fußteilentlastungsschuh

Indikationen

- Achillessehnenrupturen

Postoperativ:

- Bei Achillessehnennaht
- Nach Haglundexostosen-Abtragungen

Maximale Stabilität durch individuelle Anpassung

Die Vorteile

3-in-1: Durch einzelne, abnehmbare Elemente kann das Produkt in vielen Bereichen angewandt werden:

1. Als Lagerungsschiene z. B. bereits im OP
 2. Als Unterschenkel-Fußorthese mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
 3. Als Unterschenkel-Fußorthese mit den DAW Fersenkeilen (3-teiliges Kit)
- Einfache Verbandkontrolle durch leichtes Abnehmen und wieder Anlegen
 - Zusätzlicher Halt durch optionalen Vorfußgurt (inklusive)

Hohe Patientenakzeptanz

- Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
- Schlankes Design
- Geringes Gewicht
- Hygienisch durch Abnehmen des Schuhs und auswechselbares, bei 60° C in der Maschine waschbares Lining
- Geringe Wärmeentwicklung

Integrierte Pumpe

Für eine Stabilisierung im Sprunggelenksbereich kann das Volumen der Luftkammern erhöht und somit individuell angepasst werden. Ein Reduzieren der Luft ist durch Betätigen des Ventils möglich.

Eigenschaften

- Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung
- Physiologisches, sicheres Gangbild
- Nachhaltiges Therapiekonzept in Verbindung mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
- Universell rechts und links tragbar
- Austauschbare Innensohle



Rechts = Links



Austauschbare
Innensohle



Geringes Gewicht

Automatische Weitenregulierung


Durch die innovative Schalenteknik stellt sich die Orthese automatisch auf den Wadenumfang des Patienten ein. Die daraus resultierende Weichteilkompression erzeugt eine zusätzliche Stabilität im Unterschenkel-Fuß-Bereich. Bei besonders kräftigen Waden kann der Regler zudem ausgehakt werden.



Wadenumfang schmal



Wadenumfang breit

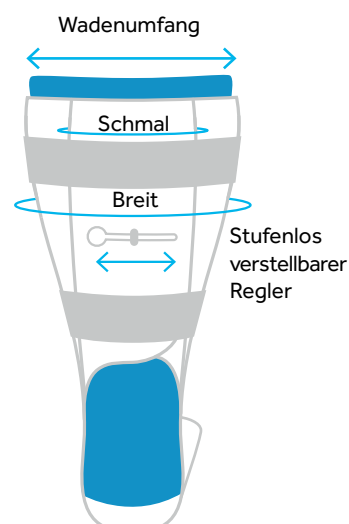



Größen + Maße



Relief Insert® 2.0

Größe	Schuhgröße	Innensohle				Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C	D			
S	37,0 - 41,0	26,0	10,5	6,5	34,3		RIX2-1	19402557
M	41,5 - 43,0	27,5	11,0	6,5	36,3		RIX2-2	19402540
L	43,5 - 47,0	31,0	12,5	7,5	40,7		RIX2-3	19402563




Relief Insert® Walker 2.0



Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN	Größe	
		A	B	C						D	Toe Cap, Innensohle
XS	37,0 - 38,5	24,6	9,4	6,0	38,3	RIW2-0	18090274	RIW2W-0	18090328	WM	1
S	39,0 - 41,0	25,8	10,3	6,5	38,3	RIW2-1	18090251	RIW2W-1	18090305	MS	1
M	41,5 - 43,0	27,0	11,0	6,5	40,3	RIW2-2	18090245	RIW2W-2	18090297	MM	2
L	43,5 - 45,0	28,7	11,2	7,0	44,7	RIW2-3	18090216	RIW2W-3	18090280	ML	2
XL	45,5 - 47,0	30,0	12,0	7,5	44,7	RIW2-4	18090268	RIW2W-4	18090311	MXL	2

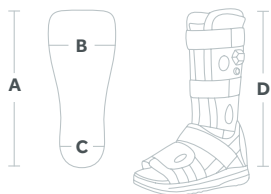

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

Kombiprodukte

DAW (DARCO Achilles Wedges)

Fersenkeile für Walker

PegAssist® Insole

Waben-Einlegesohle

Devisys® Spikes

Spikes für Fersenbereich

Puzzle Insole®

Modulare Innensohle

Rain Cover

Zehenkappe

Relief Contour Insole

Weichbettungseinlegesohle

Toe Cap

Zehenkappe

PegContour® Insole Uni

Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle

TwinShoe®

Höhenausgleichsschuh

Mehr
Informationen



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

